

品名	環境除菌ワイプ ナクリア-D	主成分	第四級アンモニウム化合物、塩化ベンザルコニウム、他	保管推奨温度	5℃～35℃
用途	高頻度接触表面の清掃・消毒	原産国	日本	液性	弱アルカリ性

使用上の注意

- 幼児の手の届かない場所に保管すること。
- 中身の乾燥を防ぐため、フタ及び開口部キャップを正しく閉めること。
- 除菌ワイプは水に溶けません。詰まりの原因になるため、排水口や水洗トイレに流さないこと。
- 塗料など塗った物、印刷物、樹脂製品に使用するときは、溶解、変色、変質などの異常が生じる場合があるため、確かめてから使用すること。

用途




使用方法




感染対策上必要な個人防護具（PPE）を着用してください。



フタを開けてステッカーをはがしワイプを1枚ずつ取り出してください。

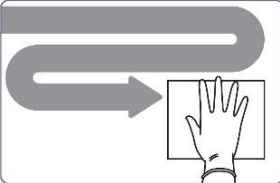

ワイプを広げて清潔方向から不潔方向へ同じところを拭かないようにS字を描くように擦らず拭いてください。

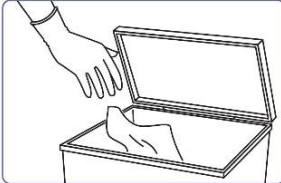

汚れたり乾いたりした場合は新しいワイプに交換し、施設で決められた容器に廃棄してください。乾燥を避けるため、使用後はフタを閉めてください。

※紫の枠線が実際のワイプのサイズです

製品ラインナップ

品名	品番	ワイプサイズ	梱包単位	価格	JANコード
 環境除菌ワイプ ナクリア-D	PND-1	140mm×200mm	18個/箱 (100枚/個)	オープン	4580167169872

※ 除菌とは硬質表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去するものではありません。

【代理店】

 株式会社エコライフサポート

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目2-5 サンライズ仙台1F
TEL : 022-792-9821 FAX : 022-355-8639
MAIL : info1@eco-ls.co.jp
URL : https://www.eco-ls.co.jp

【販売店】

販売元 株式会社パルメディカル

〒101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目9番17号
TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980 https://www.palmedical.co.jp

環境除菌ワイプ ナクリアD

除ウイルス・除菌・洗浄・防カビ・消臭 オールインワン除菌ワイプ





特に重点的な感染対策が必要なエリアでも確実に除菌

除ウイルス 除菌 洗浄 防カビ 消臭

までの機能を兼ね備えた **オールインワンタイプ** の除菌剤



注1 米国EPA
(環境保護庁)
承認
61178-1

感染・易感染患者がいる病棟、血液由来感染の
リスクが高いユニットでも安心してご使用頂けます。

感染・易感染患者がいる病棟では院内感染を防止するために多剤耐性菌を含む細菌・エンベロープ・ノンエンベロープを含むウイルス・真菌・芽胞菌など微生物に対してより強力な対策をとる必要があります。

また、血液の曝露リスクが高い手術室や透析室ではHBV・HCVなどの血液媒介病原体の伝播予防策が極めて重要になります。ナクリア-Dに使用されている除菌剤は上記を含む142の微生物に対する除菌効果が確認・公的機関(米国EPA)に登録されています。院内感染対策として、手術室・透析室を含むエリアで安心してご使用頂けます。

除菌効果については、有機物がほぼ100%の存在下においても試験されており、使用環境による影響が少ないことも確認されています。また除菌効果は塗布後も7日間持続するので、環境表面の除菌剤による“セルフ除菌”機能が働きます。

既存除菌剤 との比較


	一般細菌	エンベロープ ウイルス	ノン エンベロープ ウイルス	芽胞菌 (クロストリジウム ディフィシル)	有機物 存在下での 除菌効果減衰	除菌効果 持続	開封後の 安定性
第四級アンモニウム塩	○	×	×	×	減少	不明	○
アルコール	○	○	△	×	著しく減少	無	揮発注意
次亜塩素酸系	○	○	○	○	著しく減少	無	急激に低下
ナクリア-D	○	○	○	○	無し	7日間	60日以上

注2 142の菌や
ウイルスを
除去

新しい感染症の流行・アウトブレイク防止対策に最適です。

登録されている142の微生物には、新型コロナ(SARS-CoV-2)・エボラ・MERS・SARS・新型インフルエンザ(H1N1)・B型・C型・エイズなどのウイルス、MRSA・VRSA・VREなどの多剤耐性菌、などが含まれています。これは新しい感染症の流行・アウトブレイク防止対策のための大きな根拠となります。

ナクリア-D 除菌メカニズム

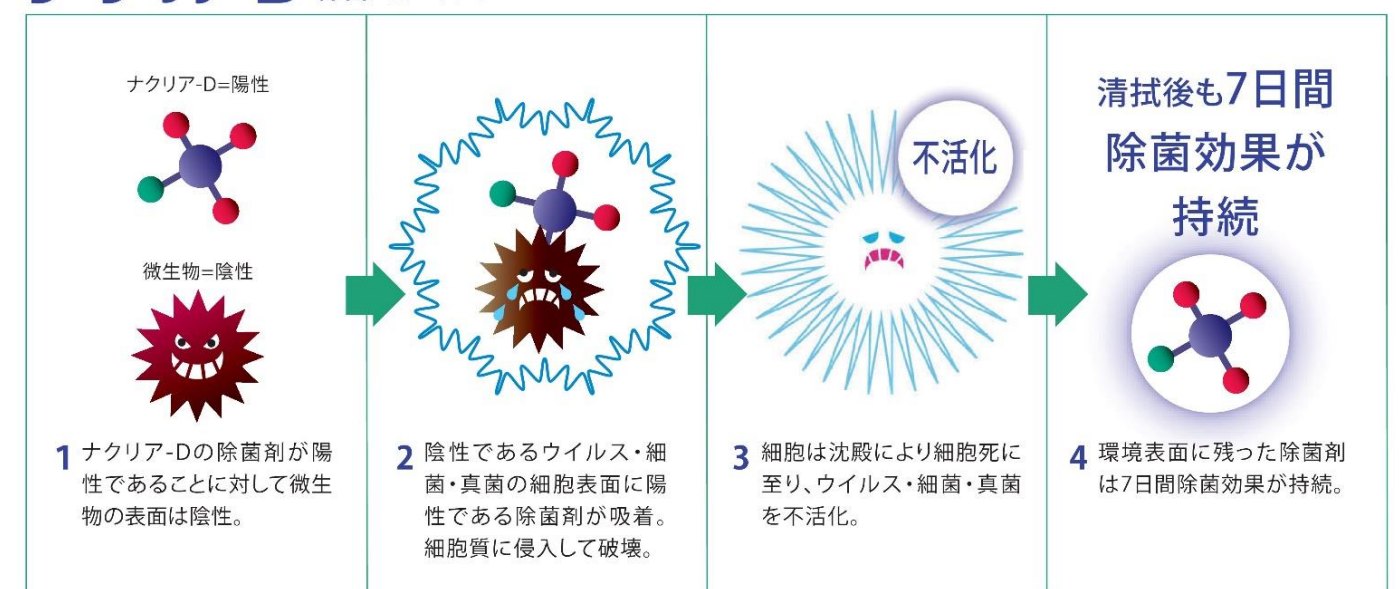

簡単・確実・
安全



日本で
製造・管理。



毒性なし:EPAでは
食器を除菌した後
に洗い流す必要は
ないとしています。



低腐食性:航空機
に使用されている
基材にも使用可。



臭い・べたつき・
泡立ちがほとん
どありません。

ナクリア-Dに使用されている除菌剤は米国・カナダ・ヨーロッパ・アジアで30年以上使われ続けています。

医療施設に限らず、政府機関・航空会社・製薬会社など多くの施設で採用されています。

取り出して拭くだけのパウチタイプなので、調製や希釈ミスなどのヒューマンエラーを無くすることができます。

プラスチック・金属・ガラス・木・ゴムなど、ほとんどの基材に対して腐食性がないので施設内全てのエリアを除菌・清拭できます^{注3}。また、べたつきや嫌な薬品臭が無いので清掃者にもストレスを与えません。

注1: ナクリア-Dは主成分として米国MICROGEN社製除菌剤D-125を使用しています。D-125は米国EPA(環境保護庁)に登録され多くの医療施設にて使用されています。

注2: 2020年7月現在。 注3: プラスチック樹脂は、グレードや加工形状によっては基材の破損などの影響が出る場合があります。ME機器・OA機器につきましては機器の清掃マニュアルをご確認の上ご使用下さい。